

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

FROTTIS VAGINO-RECTAL

! IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 écouvillon.
- 1 tube à bouchon rose.

! IMPORTANT

Le tube ne peut pas être rincé.

Il contient un milieu liquide AMIES indispensable à l'analyse.

ÉTAPE 1




Notez sur l'étiquette du tube fourni votre nom, prénom et l'heure de prélèvement.

ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3

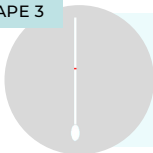

Ouvrez l'emballage stérile et sortez l'écouvillon. Veillez à ne pas toucher l'extrémité de l'écouvillon avec vos doigts.

ÉTAPE 4


Pour le frottis vaginal :

Introduire doucement l'écouvillon dans le vagin sur **une distance d'environ 5 cm** et tourner doucement l'écouvillon pendant **15 à 30 secondes**. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin afin de récolter un maximum de cellules.

Pour le frottis anal :

Insérez délicatement l'écouvillon dans le rectum à environ **3 à 5 cm de profondeur** et faire doucement tourner l'écouvillon pendant **5 à 10 secondes**. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du rectum afin de récolter un maximum de cellules.

ÉTAPE 5

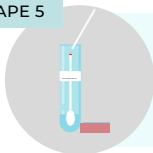

Transférez l'écouvillon dans le tube et cassez la tige de l'écouvillon au niveau du trait rouge.

ÉTAPE 6



Fermez hermétiquement le tube et placez-le dans le sachet prévu à cet effet.