

VERZAMELMETHODE

UROGENITALE UITSTRIJKJES



BELANGRIJK

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Om deze steekproef te kunnen nemen, stellen wij u het volgende ter beschikking:

- 1 wattenstaafje.
- 1 tube met een roze dop (voor vrouwen) of een oranje dop (voor mannen).




BELANGRIJK

De slang kan niet worden uitgespoeld.
Het bevat een AMIES-vloeistofmedium dat essentieel is voor de analyse.



STAP 1

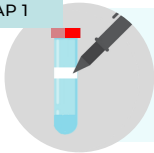


Schrijf uw naam, achternaam en het ophaaltijdstip op het etiket van de meegeleverde buis.

STAP 2



Was je handen grondig.

STAP 3

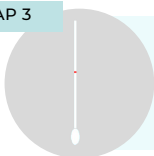

Open de steriele verpakking en haal het wattenstaafje eruit. Raak de punt van het wattenstaafje niet met uw vingers aan.

STAP 4


Vaginale uitstrijk (roze dop):

Breng het wattenstaafje voorzichtig ongeveer 5 cm diep in de vagina en draai het 15 tot 30 seconden zachtjes rond. Zorg ervoor dat het wattenstaafje de vaginawand raakt om zoveel mogelijk cellen te verzamelen.

Urethrale uitstrijk (oranje dop):


De patiënt mag gedurende 2 uur vóór de afname van het monster niet urineren. Breng het wattenstaafje idealiter 2 tot 4 cm diep in de urethra in en draai het vervolgens 2 tot 3 seconden voorzichtig om zijn as.

STAP 5

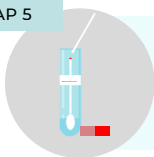

Plaats het wattenstaafje in het buisje en breek het steeltje af bij de rode lijn.

STAP 6

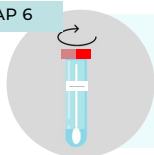

Sluit de tube goed af en plaats deze in de daarvoor bestemde zak.