

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

FROTTIS NASO-PHARYNGÉ

⚠ IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous fournissons :

- 1 écouvillon.
- 1 tube à bouchon rose.

⚠ IMPORTANT

Le tube ne peut pas être rincé.

Il contient un milieu liquide AMIES indispensable à l'analyse.

Cet examen peut-être désagréable pendant un court instant.



ÉTAPE 1




Notez sur l'étiquette du tube fourni le nom, prénom du patient ainsi que l'heure de prélèvement.

ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3

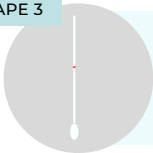


Ouvrez l'emballage stérile et sortez l'écouvillon. Veillez à ne pas toucher l'extrémité de l'écouvillon avec vos doigts.

ÉTAPE 4




Enfoncez doucement l'écouvillon profondément dans la narine (environ jusqu'à la moitié de la longueur du nez à l'oreille) et **détachez autant de cellules que possible** en grattant la face interne de la narine

ÉTAPE 5

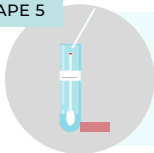

Transférez l'écouvillon dans le tube et cassez la tige de l'écouvillon au niveau du trait rouge.

ÉTAPE 6

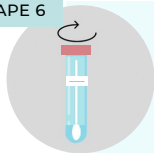

Fermez hermétiquement le tube et placez-le dans le sachet prévu à cet effet. Dans l'attente de l'envoi, conservez l'échantillon au frigo (+4°C environ).